

報道関係各位

介護業界の2025年問題の解決に寄与 労力軽減を図る医療・福祉施設に向けた 新サービス「フランスベッド長期レンタル」を本格的にスタート

高機能介護ベッドのレンタルで介護従事者と利用者のどちらの負担も軽減

フランスベッドホールディングス株式会社

フランスベッド株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:池田 茂)は、病院や高齢者施設などの医療・福祉施設向けに、昨年8月からトライアルしていた、自社の高機能介護ベッドを長期でレンタルする新サービス「フランスベッド長期レンタル」を、2月1日(木)より本格的にスタートいたします。



自動寝返り支援ベッド



超・超低床フローアーベッド

■フランスベッドの高機能介護ベッドとは

フランスベッドでは、介護者の労力軽減や生産性向上を図るとともに、利用者のQOLの向上を目指す介護ベッドを展開しています。本サービスのレンタル対象は、①寝返りを支援する自動運転機能を備えた「自動寝返り支援ベッド」、②ベッドからの転落時の衝撃を緩和できる「超・超低床フローアーベッド」、③安定した座位を保持しベッドからの転落を予防する低床サイドアップ3モーターベッドの3種類。(※参考資料)

安全性を追求した独自機能をもつ高機能ベッドの提供により利用者の安全を守り、介護負担を軽減します。

■医療・福祉施設向け新サービス「フランスベッド長期レンタル」の特徴

- ✓ 介護者の労力軽減や生産性向上を図り、介護の2025年問題への解決策を提供
- ✓ 利用者のQOL向上をサポート
- ✓ レンタル期間は8年間
- ✓ 高機能介護ベッドの導入費用を最小限に抑え、費用の平準化や資金の効率的な運用が可能
- ✓ 長期レンタルにより製品の長寿命化を促進、使用済み介護ベッドの廃棄を減少させ循環型経済へ貢献




高齢者人口の増加に伴い、介護現場では人手不足や業務効率化が課題となっています(2025年問題)。医療・福祉施設向け新サービス「フランスベッド長期レンタル」は、初期投資を抑え、介護者の負担を軽減するとともに、利用者への高品質なケアを提供します。また、資源の有効活用につながるレンタルサービスを促進することで、サステナビリティの向上に貢献します。

フランスベッドでは今後も、付加価値の高い商品やサービスの提供に加えて、環境問題や社会問題に配慮した企業活動を一層推進し、「豊かさやさしさ」のある暮らしの実現に貢献してまいります。

■レンタル対象商品一覧(医療・介護用ベッド)

商品	 自動寝返り支援ベッド	 超・超低床フローアーベッド	 低床サイドアップ 3 モーターベッド
特長	体位変換に要する労力を軽減	ベッドからの転落時の衝撃を緩和	安定した座位を保持しベッドからの転落を予防
レンタル価格/月	7,370 円(税込)/6,700 円(税別)	3,960 円(税込)/3,600 円(税別)	2,970 円(税込)/2,700 円(税別)

■レンタル対象商品一覧(マットレス)

商品	 床ずれ防止マットレス UF-71	 防水・高密度ウレタン薄型マットレス SM-21N SW	 防水・リバーシブルマットレス SM-61
対応ベッド	自動寝返り支援ベッド	超・超低床フローアーベッド	低床サイドアップ 3 モーターベッド
特長	体圧分散性に優れた両面仕様が可能な床ずれ防止マットレス	超・超低床フローアーベッドに最適な厚さ 6 cmの薄型仕様	表裏で異なる寝心地(ハード面、ソフト面)を選べるリバーシブル仕様
レンタル価格/月	638 円(税込)/580 円(税別)	264 円(税込)/240 円(税別)	220 円(税込)/200 円(税別)

※医療・介護用ベッドのみ、マットレスのみのレンタルも承ります。

※レンタル対象商品およびレンタル価格はニュースリリース配信時の情報です。今後モデルチェンジ、価格変更の可能性もあります。

【サービス開始時期】 2024 年 2 月 1 日(木)

■本資料に関する報道機関からのお問い合わせ
フランスベッドホールディングス(株) 経営企画部 広報 IR 課
TEL: 03-6741-5505 Mail: kouhou@francebed.jp

■本資料に関する読者からのお問い合わせ先
フランスベッド(株) 法人企画課 TEL: 03-5549-2936

①自動寝返り支援ベッド

安心・安全の自動運転モードで夜間の体位変換に要する
労力を軽減。ご利用者様の安眠も確保。



動画をご覧いただけます。



自動寝返り支援ベッド
FB-640A・PS02

W972 x L2107mm 床板高320~665mm

寝返り 自動運転：5~10度

手動運転：0~25度

背上げ0~72度 脚上げ0~24度

ワンウェイ・タルロックキャスター



背上げ・脚上げした状態で寝返り運転が可能です。(角度制限がございます。)



5つのPoint

- Point ① 床板が自動運転で左右に時間をかけてゆっくりと傾き、床ずれ予防の一助に
- Point ② ご利用者様の安眠を妨げずに夜間も体位変換を安全に行えます。
- Point ③ 背上げをしたまま寝返りも可能です。
- Point ④ 液晶ディスプレイ付コントローラーで設定・操作が簡単
- Point ⑤ 寝返り角度・速度・時間の設定が可能(自動運転モード時)

自動寝返り支援機能

自動運転でゆっくりと時間をかけ、ベッドを傾けて体位変換が行えますので、ご利用者様の睡眠を妨げません。

職員様の体位変換に要する時間や身体的負担など、介助負担を大幅に軽減します。



寝返り角度・動作速度・操作時間を簡単設定

ご利用者様の体重や状況に応じて、寝返り角度、速度、時間などを、大型の液晶画面を見ながら設定ができます。

操作方法も表示されるので、取扱説明書がなくても設定・操作が簡単にできます。



移乗介助負担の軽減

ベッドから車いすへの移乗の介助負担を軽減。短時間で行えます。



- 2 ベッドをフラットに戻し、ご利用者様の足をベッドの外側に出し、ギャッチアップ操作をします。
介助負担が少なく、端座位の姿勢に誘導できます。
- 3 座位姿勢となります。
- 4 車いすへの移乗がスムーズに行えます。
フランスベッド独自のノンサイドフレーム構造で負担のない姿勢でベッドにより近付き、介助ができます。

②超・超低床フローアーベッド

安心・安全の超・超低床 床板高さ110ミリ、
安全性を追求した電動3モーターベッド。
ベッドからの転落の危険性が高く、電動ベッドを
お使いになれなかった方におすすめです。



画像をご覧ください。



超・超低床フローアーベッド FLB-04
内蔵キャスタータイプ

W1030 x L2140mm 床板高110~610mm

背上げ0~75度

脚上げ0~35度

ハイローストローク0~500mm

ベッド 移動用 双輪キャスター

転落時の衝撃緩和

布団感覚で安心

介助負担軽減

職員の腰痛予防

500ミリのハイローストローク(床板面110~610ミリ)により、
食事の介助や車いすへの移乗が安全でスムーズに行え、介助負担の軽減が
はかれます。



③低床サイドアップ 3 モーターベッド


両側の床板が身体を包み込むように支える
背上げサイドアップ機能により

座位姿勢を保持、ベッドからの転落を予防し、挟み込みを予防
します。



低床 サイドアップ 3 モーターベッド
FBD-N236R PS02 /SU
ワンウェイトータルロックキャスター

- 3モーター/背上げ・脚上げ・ハイロー機能
- フレーム本体/スチール
- ヘッド・フットボード(脱着ストッパー付き)/スチール、樹脂

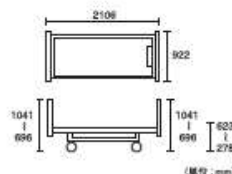

介助時や寛ぎ時、身体状況に合わせて両側サイドアップ、片側サイドアップ、フラット状態の使い分けができます。

両側サイドアップ



- 座位姿勢の安定により胃ろう等、経管栄養投与時に療養者の方の負担を軽減します。
- 食事介助の際の職員様の負担を軽減します。

片側サイドアップ



- 介助や移乗の際の姿勢が安定し、負担を軽減します。

背上げサイドアップ機能



背上げと連動して両サイドの
床板が身体を包み込む